

# Posifon Smartsole

## Om Posifon

Posifon AB är marknadsledande i Sverige på GPS-larm och medicinpåminnare. Vi är ett kundnära innovativt företag baserat i Göteborg. Vår vision är att alla, oavsett ålder, familjesituation, boende och förmåga ska känna sig trygga att självständigt kunna ägna sig åt fritidsaktiviteter och delta i samhällslivet. Trygghet och självständighet ger högre livskvalitet.

## Vetenskapligt utvärderat

Under 2011-2012 genomförde Högskolan i Borås, med stöd av Alzheimerfonden och regeringsuppdraget Teknik för äldre på Hjälpmedelsinstitutet, en vetenskaplig studie "Nyttoeffekterna med mobila trygghetslarm för personer med demenssjukdom och deras anhöriga". Studien påvisade att Posifons larm gav en ökad trygghet och frihet för bäraren av larmet samt en minskad oro och stress för de anhöriga. Även omsorgspersonalen såg tydliga nyttor.

I studien ingick en etisk analys som påvisade att inga etiska hinder finns för att använda GPS-larm. Lagstiftningen är dock oklar och varje kund måste själv göra sin värdering. Vi stödjer norska kommuners inställning att GPS-larm är frihetsskapande och ger det minsta ingreppet på personers självbestämmande och personliga integritet.

Kopplat till studien gjorde Hjälpmedelsinstitutet en samhällsekonomisk kostnadsnyttoanalys som påvisade tydliga ekonomiska vinster för samhällsekonomin, såväl på kommunal som statsnivå.



Posifon Smartsole är ett GPS-larm som placeras i skorna. Det aktiveras när brukaren rör på skon och meddelar anhöriga, personal eller en larmcentral om brukaren passerar utanför ett bestämt trygghetsområde. Sulan är ett diskret sätt att tillhandahålla spåringsmöjligheter och underlättar för den som lätt glömmer, eller inte vill bära en telefon, en armbands- eller fickenhet.

Med Posifon behöver vi inte oroa oss för att någon skall komma bort. Friheten för de boende ökar och behovet av passning minskar. Och det är lätt och odramatiskt att hjälpa någon tillbaka.

– Erika Lövrinczy, enhetschef demensboende

## Diskret




Med GPS-enheten i sulan bär brukaren inte något synligt larm som kan störa eller tas av. Används skorna så kommer den alltid vara med. Det enda som måste göras är att sätta i sulan i skon igen när den har laddats. Med Posifon Smartsole blir det enkelt att vara aktiv utan att det inkräktar på frihetskänslan.

## Enkel



Posifon Smartsole är alltid påslagen, med energisparläge för lång batteritid. En varning skickas när batterinivån blir låg. Laddningen sker trådlöst, sulan placeras bara på laddaren. Vid inaktivitet går den i viloläge och så fort enheten förflyttas aktiveras den och återupptar lokalisering.

## Innovativ

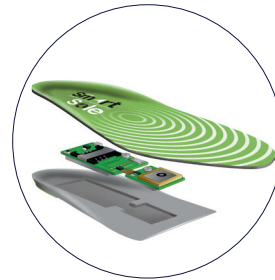

Posifon Smartsole är en innovativ lösning med all elektronik inkaplad i sulan. Den kan läsa av riktningssändringar och acceleration, och tar positioner vid rätt tillfällen. Enheten är vattentät och gjord för att klara alla de miljöer som skor vanligtvis utsätts för.


## Specifikationer

Skostorlek	36-47
Batteri:	3,7 V Li-Ion, uppladdningsbart
Batteritid:	Upp till 14 dagar
Laddning:	Trådlöst med Induktion
Uppdateringsintervall för spåning:	Ställbart, standard 5 minuter
Nätverk:	Quad Band GSM/GPRS

## PosifonCare

PosifonCare är ett nytt verksamhetssystem för GPS-larm som har utvecklats tillsammans med åtta kommuner i ett FoU-projekt. Målet har varit att möjliggöra ett bredare användande av GPS-larm, samt effektiva och kvalitetssäkrade arbetssätt med god användarvänlighet.

PosifonCare är ett öppet system med hög IT-säkerhet, som kan hantera olika typer av produkter. På så sätt kan man anpassa användandet efter brukarens behov. Systemet breddar målgruppen för välfärdsteknik och öppnar för nya möjligheter att på ett innovativt sätt hantera larmflöden. PosifonCare finns tillgänglig som internet-plattform och app, vilket ger ökad flexibilitet i användningen. Med systemet tar vi stora kliv mot ett breddinförande av GPS-larm

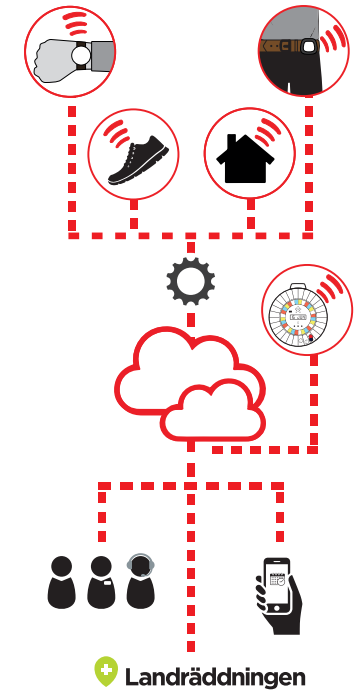

## GPS-larm för varje behov

Är inte Smartsole rätt för dig? Posifon tillhandahåller flera typer av enheter för att passa alla behov, be att få höra mer om våra alternativ:



	Smartsole	Keruve	GeoKeeper	Zembro
Fjärrstarta spåring	Via portal, startar vid rörelse	Via SMS, portal, anhörigenhet	Via portal	Via portal
Trygghetsområde	JA	JA	JA	JA
Larmknapp	NEJ	TILLVAL	JA	JA
Samtalsfunktion	NEJ	NEJ	JA	JA
Energisparfunktion	Viloläge vid inaktivitet	Valbart	Valbart	Valbart
Bärs	I skon	handled, bälte, väska, halsrem, ficka	handled, bälte, väska, halsrem, ficka	Handled
Laddning	Induktion	Via sladd	Via sladd	Via sladd
Vattentålighet	Vattentät	Vattentät	Vattentålig	Vattentålig
Mobilnät	GSM, GPRS	GSM, GPRS	GSM, GPRS	GSM, GPRS